

Оглавление

Добро пожаловать 3

Как зарядить Conversor Pro

Настройка Conversor Pro в первый раз

Розетки и подключение микрофона

Розетки и разъемы - приемник,

С помощью микрофона шею шнур

Несколько приемников

Несколько микрофонов,

Conversor Pro Plus

Инструкция по уходу

Ремонт и сервис центров,

Замена батарей в

Conversor Pro в повседневном использовании

Поиск и устранение неисправностей

Гарантия производителя

Отчетности, соблюдения и соответствия

4

5

9

10

11

12

12

13

14

14

15

16

21

22

23

Положение о соответствии

Прибор *Conversor Pro* будет использован в качестве вспомогательного слухового устройства для лиц с нарушением слуха.

Для продажи в странах Европейского Союза и всех стран за пределами Европейского Союза.



Мы, компания **Conversor Limited** зарегистрированная по адресу **The Lansbury Estate 102 Lower Guildford Road Woking, Surrey GU21 2EP Великобритания**, заявляем, что продукт *Conversor Pro* вспомогательное слуховое устройство соответствует *Директивам Совета 1999/5/EC* о радио и телекоммуникационном оборудовании

ETSI EN 301-489-1 V1.7.1 (2007/04)

EN 55022: 2006 w/amdts A1 (2007)

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 A1 & A2

EN 61000-4-2: 2001

EN 61000-4-3: 2006

EN 61000-4-4: 2004

EN 61000-4-5: 2006

EN 61000-4-6: 2005

EN 61000-4-11: 2004

ETSI EN 300-422-2 V1.1.1

Производитель также заявляет о соответствии вышеуказанного продукта действующим требуемым стандартам безопасности в соответствии с **LVD 73/23 EEC**

EN 60950-1:2001 Безопасность

EN 60950-1:2003 Безопасность

Conversor Limited

В.км 2012г.

FCC ID: **QA6-CONVERSORPRO**

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при условии, что это устройство не может вызывать вредные помехи.

Изменения или модификации, не одобренные прямо стороной, ответственности за соответствие стандартам, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Когда этот датчик работает, пользователи должны убедиться, что нет других передатчиков, таких как мобильные телефоны, работающих в 20 см от него.

IC:5529A-CONVERSRO
IC:5529A-CONVERSRX


Эксплуатация данного устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) Данное устройство не должно вызывать помех (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.



* Только для Европейского союза и ЕЭЗ

Этот символ указывает, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с WEEE (2002/96/EC) и вашим национальным законодательством. Этот продукт должен быть передан в специальный пункт сбора, например, на основе «один за один», когда вы покупаете новый аналогичный продукт, или на специальную площадку для утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ЭЭО). Неправильное обращение с этим видом отходов может иметь возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека в связи с потенциально опасными веществами, которые обычно связаны с ЭЭО. В то же время, ваше сотрудничество в правильной утилизации данного продукта будет способствовать эффективному использованию природных ресурсов. Для получения дополнительной информации о том, где вы можете оставить свои отходы оборудования для утилизации, обратитесь в местный городской орган власти, органы, занимающиеся утилизацией отходов, используйте утвержденную WEEE схему или ваши службы по сбору бытовых отходов. (ЕЭЗ: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

Как зарядить Conversor Pro:

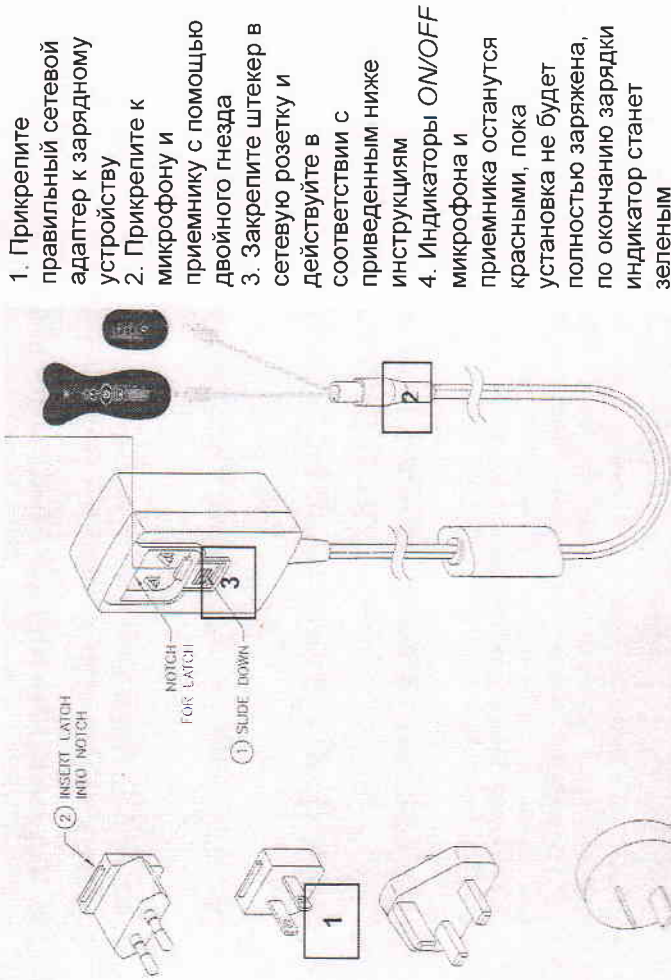

Поиск и устранение неисправностей

Микрофон и приемник не заряжаются:

Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно, подсоедините к сети и перезарядите. Убедитесь, что батареи установлены и правильно подключены (см. стр. 15). Если это не решило проблему, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или Conversor Limited для проверки или замены аккумулятора.

Микрофон и приемник не включаются:

ON/OFF кнопка должна быть нажата в течение 2-3 секунд, чтобы управлять обоими блоками. Зеленый свет кнопки будет гореть - сигнал, что устройство включено, и микрофон и приемник общаются друг с другом. Индикатор света не загорелся зеленым, показал наполовину красный, наполовину зеленый свет, что означает, что он полностью заряжен, но не общается с микрофоном. После того, как микрофон включен индикатор будет светиться зеленым цветом. Если индикатор остается красным/зеленым - микрофон находится вне диапазона или микрофон и приемник не общаются. Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или Conversor Limited.

Плохое качество звука:

Пожалуйста, убедитесь, что диапазон, в котором вы пытаетесь работать не превышает дальность действия. Убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены, так как это может привести к снижению качества звука и рабочего диапазона. Если батареи разряжаются, изменится цвет с зеленого на красный.

Зарядку Conversor Pro оставить на ночь в течение первых нескольких циклов зарядки

| Время зарядки батареи от полного разряда батареи* | Приблизительное время работы батареи | Когда индикатор батареи загорается красным светом, это означает, что только 25% заряда остается. |
|---|--------------------------------------|--|
| 25 минут | 1 час | Аккумулятор нуждается в скорой подзарядке. |
| 40 минут | 2 часа | |
| 65 минут | 4 часа | |
| 90 минут | 6 часов | |
| 150 минут | 8 часов | |
| 180 минут | 10 часов | |

*Пожалуйста, заметьте, что вам не нужно ждать, пока ваши аккумуляторы полностью разрядятся, прежде чем вы будете их подзаряжать. Вы можете заряжать их в любое время по вашему усмотрению. Однако рекомендуется полностью разряжать все батареи примерно раз в месяц.

Использование микрофона


Микрофон может быть использован в различных формах. Вы можете держать и направлять микрофон на источник звука с помощью кнопки зума на зеленый для направленного режима. В этом режиме вы можете слышать слова или звуки до 10 метров (30 футов).

Микрофон может быть оставлен в середине обеденного стола и переключен на всенаправленный режим, чтобы улавливать все звуки вокруг стола. Кроме того, микрофон может быть дан разговаривающему (оратору), который может удерживать его как обычный микрофон, можно положить на трибуне перед ним, или носить его на шее на шнуре, поставляемый с Conversor Pro.

В этом режиме микрофона диапазон работы примерно 50 метров (150 футов) в помещении и до 100 метров (300 футов) на открытом воздухе. Когда ресивер находится слишком далеко от микрофона, аппарат автоматически переключается на встроенный микрофон.

Для дальнейшие примеры того, как можно использовать Conversor Pro см. примеры, приведенные на страницах с 16 до 20.


Настройка приемника

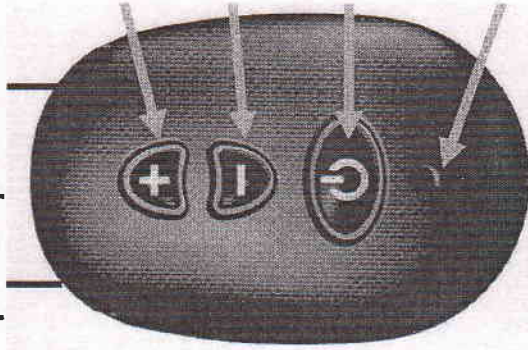

1. Для увеличения громкости нажмите эту кнопку. Звук будет увеличен каждый раз, при нажатии кнопки.
2. Для уменьшения громкости нажмите эту кнопку.
3. ВКЛ/ВЫКЛ, нажмите нижнюю кнопку на 2-3 секунды
4. Микрофон


Когда приемник включен один, индикатор кнопки ON/OFF будет наполовину зеленый, наполовину красный. Приемник будет использоваться свой внутренний микрофон.

ЗА ПОКУПКАМИ:

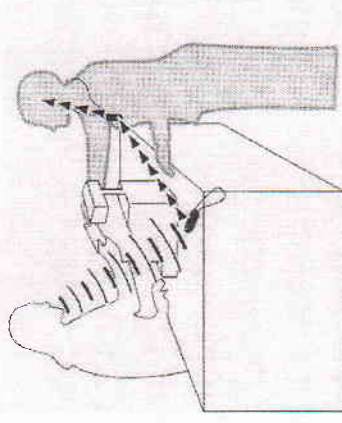

С продавцом


или

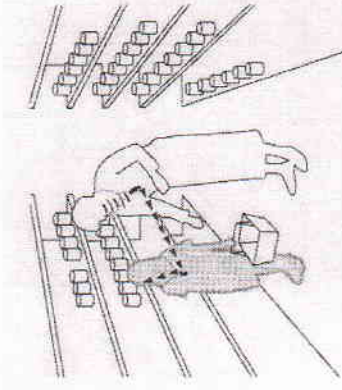

С членом семьи или другом

Установите микрофон на столешницу, чтобы услышать продавца четко. Или, если у вас есть ребенок или член семьи, который является слабослышащим, вы носите микрофон, а ваш спутник носит приемник. Ваш спутник сможет слышать ваш голос, громко и ясно, в магазине.

В КЛАССЕ:

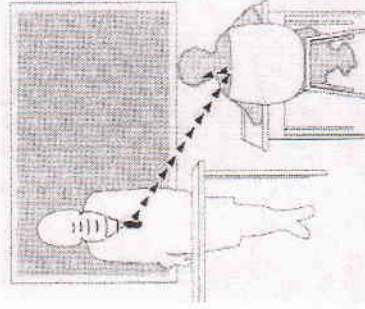

Учитель носит микрофон на шею на шнуре

С помощью шнура для микрофона, учитель носит микрофон, когда ведется разговор со всем классом. Голос учителя передается для студента(ов) в приемник(и) с повышенной ясностью до 50 метров (150 футов).

За одну-две сессии, студент, возможно, пожелает установить микрофон на стол, или станет направлять его на учителя или другого студента, когда они говорят.

(b) Проверка баланса звука


Важно, чтобы приемник с Conversor Pro соответствовал уровню громкости вашего слухового аппарата, так чтобы вы могли переключаться между ними без какого-либо повышения или снижения уровня звука. После достижения нужного уровня звука, вы можете попробовать Conversor Pro в режиме увеличения.

(c) Внешние помехи


Когда инструмент установлен на T-программе, шум может быть слышен, если слуховой аппарат полагает в полосу освещения, компьютеров и экранов телевизоров. Обратитесь к аудиологу для консультации по Регулировке или замене *telesoi* для оптимального использования для минимизации внешнего вмешательства. Если вы не отрегулируете уровень шума, Conversor Pro будет служить лишь для усиления этого вмешательства.

Розетки и разъемы - микрофон

В Conversor Pro у микрофона и приемника есть разъем для наушников 3,5 мм, который используется для зарядки аккумулятора (см. стр. 4), для подключения к ТВ и аудио кабелям.

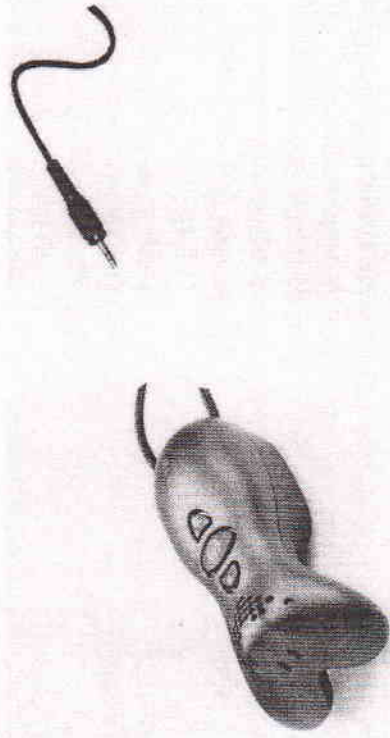


В КАФЕ ИЛИ РЕСТОРАНЕ:

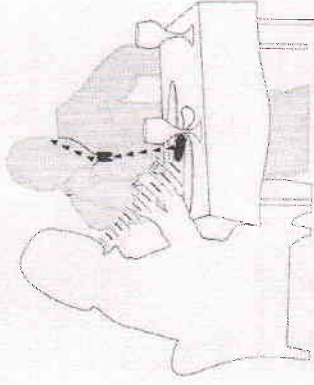

Интимный разговор в кафе или ресторан

Разместите микрофон на столе рядом с вашим спутником и выберите «режим увеличения» для непринужденной беседы, несмотря на громкие звуки вокруг вас.

ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА:

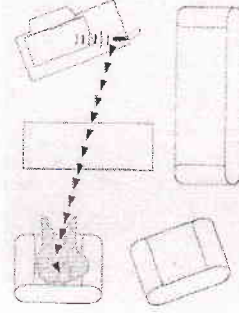

Просматривая свой собственный, или,

Просматривая с другим человеком

С Conversor Pro нет необходимости приобретать отдельный усилитель. Используя Conversor Pro Вы можете комфортно смотреть телевизор дома или в гостях.

(1) *Просматривая свой собственный:*

Поместите микрофон рядом с телевизором для оптимального уровня звука, или подключите микрофон к телевизору с помощью телевизионного кабеля. (см. стр. 9 для получения дополнительной помощи по аудио/видео связи).

(2) *Просматривая с другим человеком:*

Установите микрофон на подлокотник кресла рядом с вами и вашим собеседником, это позволяет отключить микрофон при разговоре с собеседником, для непринужденной беседы, во время прослушивания ТВ.

аудио устройство будет отключено, так, чтобы другие люди не могли его одновременно слушать.

4. Прослушивание для друзей и семьи, в то же время



. Слышать друзей и семью при просмотре телевизора Вы можете нажав кнопку на микрофоне, чтобы включить встроенный ненаправленный микрофон.

5. Телефонная связь

Телефонные разъемы можно приобрести в качестве дополнительного аксессуара. Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или Copverson Limited.

Розетки и разъемы - приемник

Приемник может также использоваться с наушниками, гарнитурой или напрямую через Аудио-Вход (DA) кабели.

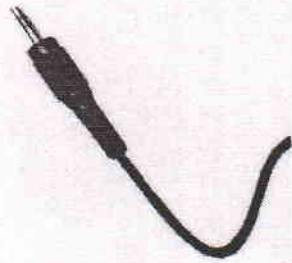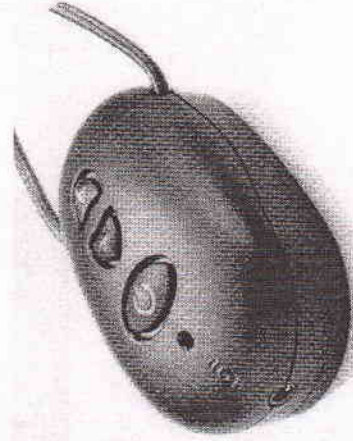


Замена батареек

Батарею на замену можно приобрести у местного торгового представителя, он может заменить ее для Вас. Вы также можете заменить ее самостоятельно, следуя следующим инструкциям:

Передатчик



Приемник

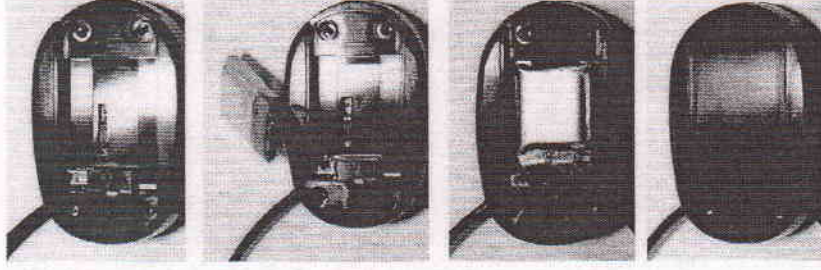

1. Сдвиньте крышку аккумулятора.
2. Удалите использованную батарею.
3. Вытяните разъем из гнезда.
4. Вставьте новую батарею в гнездо, как показано. Обратите особое внимание на то, что вилка разъема вставляется в паз основного разъема. Для этого подходит только один способ.
5. Подберите провода и установите крышку аккумулятора на место.

Шейный шнур позволяет оратору, учителю или вашему говорящему спутнику носить микрофон на шее, чтобы освободить руки для удобства и большей мобильности во время разговора в машине, в совещаниях группы или в классе. Шейный шнур крепится на микрофон, надевте его на крюк, расположенный с обратной стороны микрофона. Есть тонкие зазоры между крюком и корпусом микрофона, которые позволяют вставить шейный шнур прочно на место, но не позволяют ему соскользнуть во время работы. Просто настройте длину шнура, к примеру.

Несколько приемников

Микрофон будет работать с многими приемниками, которые необходимы для группы ситуаций, будь это только вы и ваш партнер прислушиваясь к телевизору, или в церкви, для групп, классов, конференций и туристических групп, где есть несколько слабослышащих участников. Conversor Pro система на несколько приемников доступна в двух форматах;


- *Conversor Pro Kit*: Conversor Pro с двумя или более приемниками и дополнительными расходами на малые группы
- *Conversor Pro Multitrack*: комбинация от одного до трех микрофонов и до 11 приемников Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или Conversor Limited.

Несколько микрофонов

Вы не можете использовать больше, чем один микрофон на той же частоте, в одно и то же время. Если вам нужна система, работающая с помощью нескольких микрофонов, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или Conversor Limited, и рассмотрите Conversor Pro 3-х Канальный Приемник, система обеспечивает до трех микрофонов, работающих одновременно на конференциях и заседаниях.

Conversor Pro Plus

Conversor Pro Plus является Conversor Pro с Conversor Pro TV-Передатчиком и дополнительным источником питания. Если вы приобрели Conversor Pro Plus вы найдете копию TV Pro Руководство Пользователя. Приемник может использоваться либо с Conversor Pro микрофоном или TV Pro передатчиком.

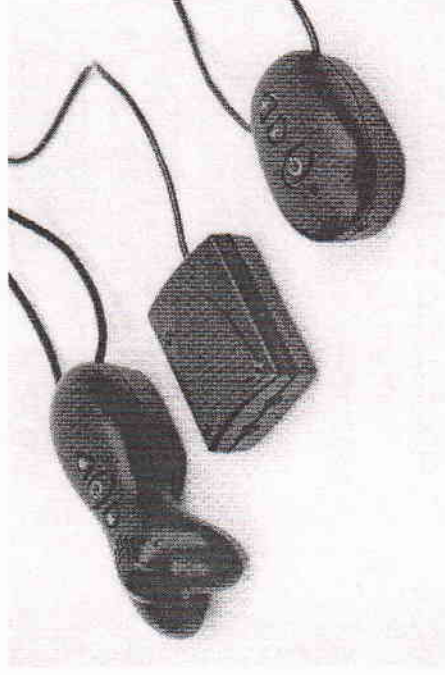

TV Pro-передатчик может быть включен и постоянно подключен к Вашему телевизору. Когда у Вас выключен телевизор Ваш TV Pro-передатчик автоматически останавливается, чтобы позволить Вам использовать Conversor Pro микрофон в других местах в доме. Когда вы хотите начать просмотр телевизора снова, выключите Ваш Conversor Pro микрофон, включите телевизор и TV Pro-передатчик автоматически начнет передавать на ресивер.
Не используйте микрофон и TV Pro-передатчик в одно и то же время, так как они взаимодействуют друг с другом.